



دستگاه تب سنج دیجیتال

مدل ها:

RG060: دستگاه تب سنج دیجیتال غیر منعطف

FG060: دستگاه تب سنج دیجیتال منعطف

احتیاط


- ۱) دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۲) قبل از استفاده پروپ دستگاه را با الکل طبی ضد عفونی کنید و حداقل ۵ دقیقه صبر فرمایید تا خشک و با محیط هم دما گردد.
- ۳) حداقل ۳۰ دقیقه قبل و در حین گرفتن درجه حرارت، از راه رفتن، دویدن، ورزش کردن، خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.
- ۴) بلعیدن باتری کشنده می باشد؛ از دسترسی کودکان به باتری دستگاه جداً جلوگیری نمایید.
- ۵) تعویض باتری را دور از دسترس کودکان انجام دهید.
- ۶) از داخل کردن دستگاه درون آب و یا شستن کامل آن با آب خودداری فرمایید. برای تمیز کردن بدنه دستگاه از دستمال مرطوب استفاده نمایید.
- ۷) در محیط خشک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- ۸) توصیه می گردد در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت بیش از ۳ ماه استفاده نمی شود؛ باتری دستگاه را خارج نمایید.
- ۹) از دور انداختن باتری به همراه زباله های خانگی خودداری فرمایید.

نحوه استفاده

- ۱) دکمه خاموش/ روشن را فشار دهید. صدای بیپ (Beep) شنیده خواهد شد و صفحه نمایش روشن می شود.
- ۲) پس از روشن شدن صفحه نمایش، آخرین دمای اندازه گیری شده نمایش داده می شود.
- ۳) علامت LO نمایش داده شده در صفحه نمایش به دلیل پایین تر بودن دمای محیط از دمای طبیعی بدن می باشد و پس از قرار دادن دستگاه در محل اندازه گیری برطرف می شود.
- ۴) برای تغییر واحد اندازه گیری از °F (درجه فارنهایت) به °C (درجه سانتی گراد) و بالعکس هنگام روشن کردن دستگاه دکمه روشن/ خاموش را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

۵) بعد از تمام شدن اندازه گیری، علامت C یا F چشمک زن ثابت شده و به مدت چند ثانیه صدای بیپ (Beep) پخش می‌شود.

۶) برای خاموش کردن دستگاه دکمه روشن/خاموش را فشار دهید، در غیر اینصورت دستگاه، بطور خودکار پس از ۹ دقیقه خاموش می‌شود.

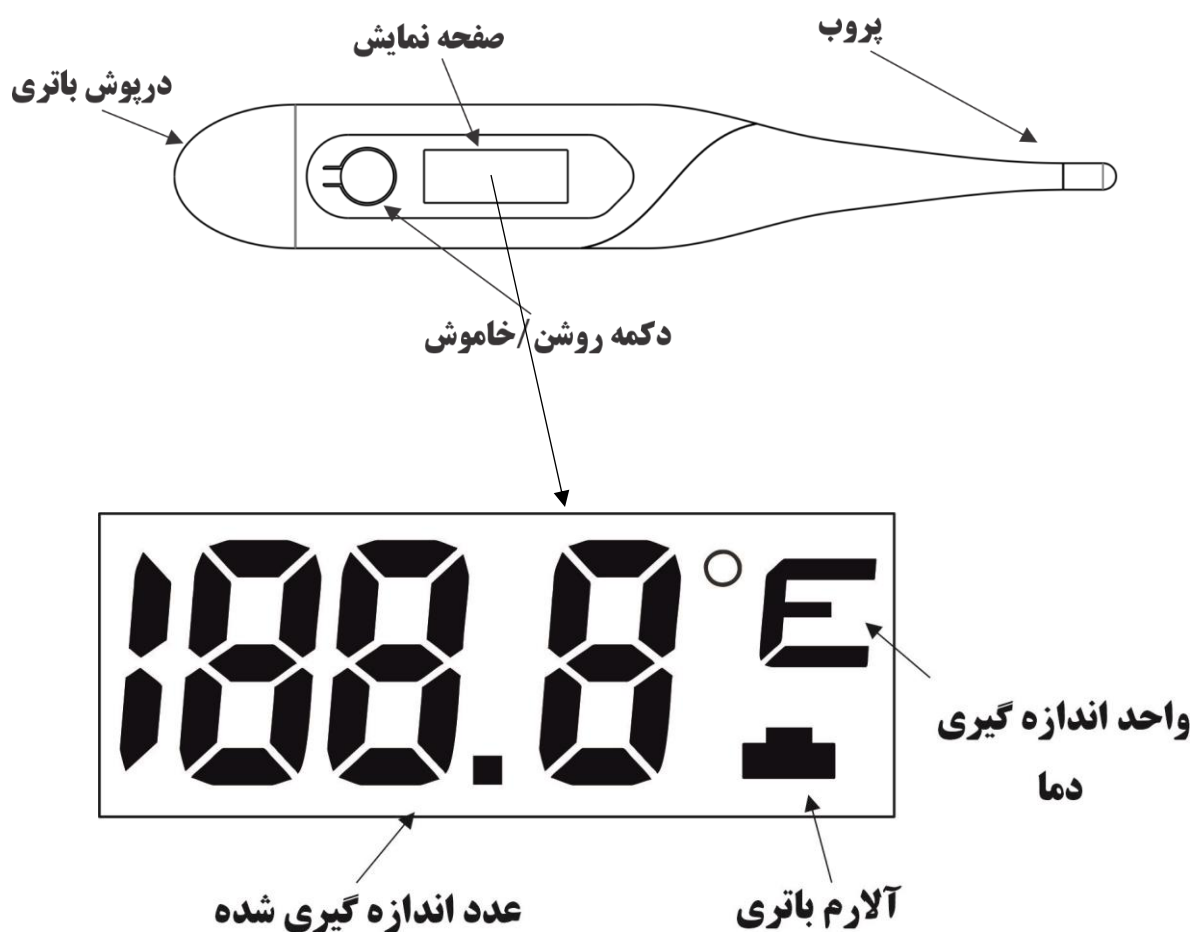

اندازه گیری از طریق دهان

پروپ دستگاه را در انتهای زیر زبان قرار دهید و به مدت یک دقیقه دهان خود را بسته نگه دارید. حداقل زمان اندازه گیری ۱ دقیقه

اندازه گیری از طریق زیر بغل

گودی زیر بغل را با یک حوله خشک تمیز کنید. پروپ دستگاه را در گودی زیر بغل قرار دهید و به مدت تقریبی ۲-۳ دقیقه بازوهایتان را به طرف قفسه سینه قرار دهید تا پروپ به خوبی پوشیده شود. سپس دستگاه را روشن کنید.

نکته: درجه حرارت زیر بغل بطور کلی ۰/۵ درجه سانتی‌گراد کمتر از دهان است.

اندازه گیری از طریق مقعد

به نرمی پروپ را به اندازه تقریبی یک سانتی متر به مدت ۱ دقیقه درون مقعد بیمار قرار دهید.

نکته: درجه حرارت مقعد به طور کلی ۰/۵ درجه سانتی گراد بالاتر از دهان است.


توجه:

فاصله بین اندازه گیری ها پس از اتمام هر اندازه گیری محدودیتی ندارد.

چنانچه فرد در حال حرکت (راه رفتن یا دویدن) یا فعالیت فیزیکی باشد، دستگاه قابل استفاده نمی باشد.

تعویض باتری

برای تعویض باتری درپوش باتری را باز نموده، به اندازه یک سانتی متر برد دستگاه را بیرون کشیده، باتری قبلی را خارج کرده و باتری جدید را جایگزین نمایید. برد را به محل اولیه بازگردانده و درپوش را ببندید.

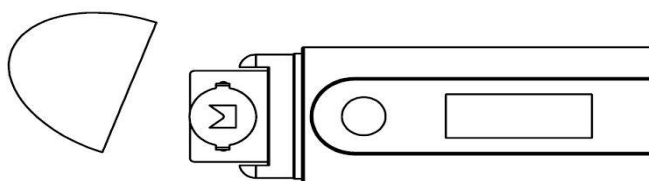

هشدارها و خطاها

ردیف	شرح هشدار و خطاها	نوع هشدار و خطا	شرح علامت
۱	هشدار دمای بالاتر از ۴۳ درجه سانتی گراد	تصویری	H, °C
۲	هشدار دمای پایین تر از ۳۲ درجه سانتی گراد	تصویری	Lo °C
۳	هشدار تب (دمای بالاتر از ۳۷/۵ درجه سانتی گراد)	صوتی	شنیدن ۴ بار صدای بیپ (Beep)
۴	هشدار باتری	تصویری	37.0 °C
۵	خرابی دستگاه	تصویری	Err °C

جدول مشخصات فنی			
محدوده اندازه گیری دما	32.0 °C ~ 42.0 °C 89.6 °F ~ 107.6 °F	صحت اندازه گیری	±0.1 °C/F
وزن	حدوداً ۱۰ گرم با احتساب باتری	نوع حفاظت قسمت کاربردی در برابر شوک الکترونیکی	نوع BF
حافظه	برای نگه داری آخرین مقدار اندازه گیری شده	حالت عملکرد	دائم کار
باتری	باتری ۱/۵ ولت DC سکه ای (سایز LR41)	نوع کارکرد	مستقیم
عمر باتری	حدوداً ۲۰۰ ساعت	دمای مرجع	دمای داخلی بدن
ابعاد	12.4cm×1.8cm×0.9cm(L×W×H)	مطابقت	IEC 60601-1 IEC 80601-1-11 IEC 80601-2-56
محیط استفاده	ترمومتر دیجیتال قابل استفاده عمومی در کلینیک‌ها، خانه و هرجایی که اندازه گیری تب کاربر مورد نیاز است	طبقه بندی حفاظت در برابر آب و گرد و غبار	- حفاظت در برابر اشیا جامد خارجی با قطر 12.5mm و بزرگتر. - حفاظت در برابر آب سرازیر شده به صورت عمودی هنگامی که محصول زاویه ۱۵ درجه دارد.
شرایط نگهداری	دما: -55°C ~ -25°C رطوبت نسبی: 85%RH ~ 15%RH فشار اتمسفری: 106KPa ~ 50KPa	شرایط عملیاتی	دما: -10°C ~ 40°C رطوبت نسبی: 85%RH ~ 15%RH فشار اتمسفری: 106KPa ~ 86KPa
مقاومت در مقابل ذرات و مایعات	IP22 <u>رقم اول (۲):</u> محافظت شده در برابر اجزای جامد بزرگتر از ۱۲ میلی متر، مانند انگشتان. <u>رقم دوم (۲):</u> محافظت شده در برابر اسپری مستقیم آب، تا زاویه ۱۵ درجه در راستای عمود.	عمر مفید	۱۰ سال
		عمر سرویس	۲ سال

دستگاه نوع BF



قبل از استفاده دفترچه راهنما را مطالعه کنید



همراه با زباله خانگی دور انداخته نشود و تفکیک شود



تولید کننده: شرکت اندیش کاران صنعت یاسمین

آدرس: تهران - خیابان طالقانی غربی - خیابان فریمان - بن بست آفتاب - پلاک ۲ - واحد ۱

تلفکس: +۹۸۲۱۶۶۹۶۸۷۷۴

وبسایت: www.aksanco.com

ایمیل: info@aksanco.com

