

راهنمای استفاده

پد حرارتی

مدل: HP 10



گارانتی و خدمات پس از فروش

پیش از استفاده جهت فعالسازی گارانتی با شرکت تماس حاصل فرمایید.
این محصول دارای ۱۲ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش است.

شرایط ابطال گارانتی:

موارد زیر شامل گارانتی نمی‌شود:

- استفاده ناصحیح چنانچه در دستورالعمل قید شده باشد.
- اقدام به تعمیر پد حرارتی یا باز کردن ریموت کنترل
- پاره کردن پد حرارتی و یا شکستن ریموت کنترل
- استفاده از ریموت کنترل متفرقه
- خرابی‌های ناشی از نوسانات و مشکلات برق ورودی

پس از اعلام خرابی و ارسال محصول حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری به خریدار نتیجه اعلام خواهد شد.

مکانیزم فراخوان

- تماس تلفنی با مشتریانی که محصول را فعالسازی نمودند
- اطلاع به شرکت‌های بخش عمده و خرد و فروشگاههای عرضه کننده
- رسانه‌های جمعی

برای اطلاعات بیشتر بارکد را اسکن کنید.



شرکت اندیش کاران صنعت

تهران، خیابان طالقانی غربی، خیابان فریمان، کوچه آفتاب، پلاک ۲، طبقه اول

کد پستی: ۱۴۱۶۸۷۳۱۴۵ تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۶۸۷۷۴

info@aksanco.com

www.aksanco.com

❶ قبل از شستشو:

⚠ هشدار - حتما ریموت کنترل را از پد جدا نمایید.

⚠ هشدار - پد را به همراه سایر البسه داخل ماشین لباسشویی بیندازید.

⚠ هشدار - ماشین لباسشویی را در حالت پایین ترین سرعت گردش و دمای حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

⚠ هشدار - از مایع سفید کننده برای شستشو استفاده ننمایید.

⚠ هشدار - از ماشین لباسشویی جهت خشک کردن استفاده ننمایید.

❷ بعد از شستشو:

⚠ هشدار - به هیچ وجه از اتو برای رفع چین و چروک و یا خشک نمودن پد استفاده نکنید.

⚠ هشدار - برای خشک کردن پد آن را آویزان نکنید، فقط روی سطح صاف و زیر سایه پهن کنید.

⚠ هشدار - به هیچ وجه از مجاله کردن (چلانیدن) پد حرارتی جهت آبیگری استفاده نکنید.

⚠ هشدار - حتما پس از شستشو از خشک بودن کامل پد اطمینان حاصل نموده و تحت هیچ شرایطی پد را در حالت مرطوب (حتی اندک) استفاده نکنید.

توصیه ها و هشدارها درباره شستشو با ماشین لباسشویی

توصیه - هنگام استفاده از محصول از روکش مناسب جهت تمیز ماندن پد استفاده نموده و تا حد ممکن از شستشو خودداری فرمایید.



⚠ هشدار - شستشوی بیش از پنج (۵) بار در طول عمر پد، موجب آسیب به لایه های داخلی آن و در نتیجه احتمال خرابی و آسیب به کاربر را به وجود می آورد.
در صورت ضرورت شستشو با ماشین لباسشویی، جهت حفظ سلامتی خود و محصول، قبل و بعد از شستن به نکات توجه فرمایید:

⚠ هشدار - از شستشو با دست جدا پرهیز نمایید.

جهت تمیز و ضد عفونی کردن پد حرارتی به توصیه ها و هشدارهای شستشو دقت فرمایید و برای تمیز و ضد عفونی کردن ریموت کنترل از الکل ۷۰ درصد استفاده نمایید.

- ۱ در صورت احتمال تعریق زیاد و یا ریختن ادرار روی بدن حتماً از روکش مناسب ضد آب استفاده نمایید.
- ۲ از فرو بردن اجسام نوک تیز یا قیچی کردن پد اکیدا خودداری فرمایید.
- ۳ حتماً قبل از اتصال به برق، ابتدا کانکتور ریموت کنترل به پد متصل شود.
- ۴ تحت هیچ شرایطی دستگاه را در حالت اتصال به برق رها نکنید.
- ۵ از این محصول روی سطوح ناهموار استفاده ننمایید.
- ۶ از این محصول در حالت تا شده استفاده ننمایید. (از تا کردن پد هنگام استفاده بپرهیزید.)
- ۷ از قرار دادن ریموت کنترل روی پد روشن خودداری فرمایید.
- ۸ دستگاه نباید در مجاورت گازهای بی‌هوشی استعمال زا استفاده شود.
- ۹ دستگاه نباید در محیط غنی از اکسیژن استفاده شود.
- ۱۰ دستگاه نباید در معرض میدان الکترومغناطیس شدید قرار گیرد.
- ۱۱ استفاده برای کودکان زیر ۷ سال توصیه نمی گردد.


هر پد حرارتی با سائز مشخص با ریموت کنترل منحصر به فرد خود کار می کند، از ریموت کنترل دیگری استفاده نشود.

تحت هیچ شرایطی کودکان بدون نظارت والدین از این وسیله استفاده نکنند.

۴. محل استفاده:

۵. معرفی دستگاه:

این دستگاه شامل بازرسی دوره ای نمی باشد.

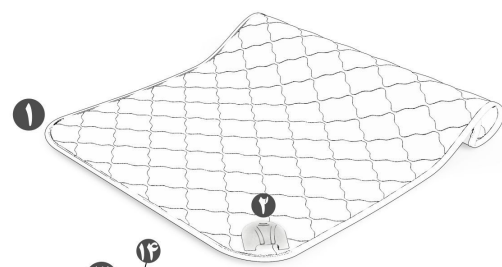

۲ محل اتصال کانکتور ریموت کنٹرل (پلاگ)

۴ ده شاخه ب ق

۶ دکمه تنظیم زمان


● کھانا کھانے کے بعد

۹) دکمه روشن/خاموش


۱۱ چراغ آلارم زرد

۱۳ چراغ آلازم قرمز


۱۸ نشانگ دما

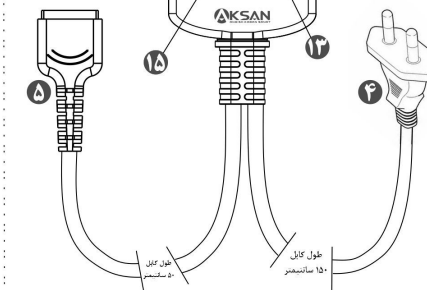

ابتدا پد را کاملاً باز کنید و مطابق تصویر کانکتور ریموت کنترل را به صورت کاملاً صاف به محل اتصال در پد وصل کنید. زائده راهنمای زیر کانکتور ریموت کنترل، جهت اتصال را نشان می دهد.

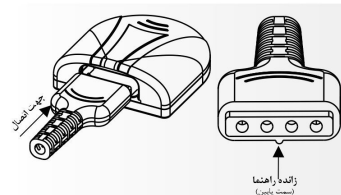

پس از اجرای مرحله اول و مطابق تصویر، دو شاخه برق را به پریز برق شهری (۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز) وصل کنید. در صورت اطلاع از نوسانات برق منطقه جهت جلوگیری از آسیب به محصول از محافظ برق استفاده نمایید.

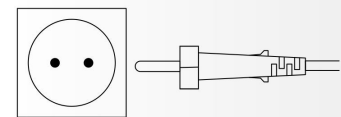

کافیست دکمه (۲) را برای چند لحظه نگه دارید تا ریموت کنترل روشن شود. برای خاموش کردن نیز دکمه (۱) را چند لحظه نگه دارید.




در حالت عادی زمان روی ۳۰ دقیقه تنظیم شده.
 با دکمه تنظیم زمان (⌚)، مدت روشن بودن را به دلخواه
 در بازه مشخص شده تنظیم نمایید.



در حالت اولیه دما روی درجه حرارت ۱ به معنای ۲۵ درجه تنظیم شده است برای افزایش دمای دلخواه دکمه افزایش دما (۳۳) را بزنید و با استفاده از دکمه کاهش دما (۳۲) (۳۳)، دمای دستگاه را به دمای دلخواه کاهش دهید.



۷. آلارم ها و عیب یابی:

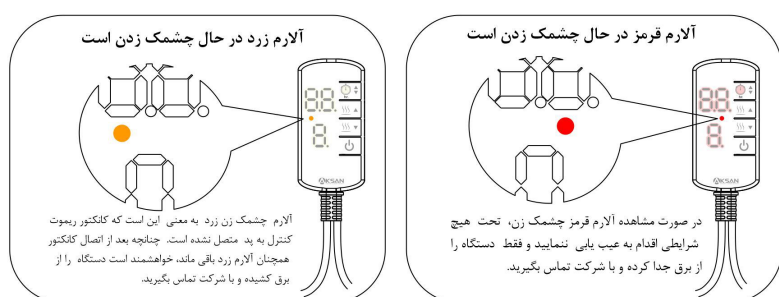

ورودی	فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز	ولتاژ: ۲۲۰ ولت متوسط شهری
توان حرارتی (وات)	۵۰	
درجه زمان بندی (ساعت)	۰/۵ - ۱ - ۱/۵ - ۲	
درجه حرارت (درجه سانتیگراد)	۱. دمای خیلی کم ۲. دمای کم ۳. دمای متوسط ۴. دمای بالای متوسط ۵. دمای زیاد (زمان محدود کمتر از ۱۰ دقیقه) ۶. دمای خیلی زیاد (زمان محدود کمتر از ۱۰ دقیقه)	۲۵ ± ۱ - ۳۰ ± ۱ - ۳۵ ± ۱ - ۴۰ ± ۱ - ۴۵ ± ۲ - ۴۶ ± ۲ -
محافظت در برابر شوک الکتریکی	کلاس II	
نوع قسمت کاربردی	BF Type	
عملکرد دستگاه	پیوسته	
درجه محافظت در برابر گرد و غبار و آب نود	بد حرارتی: IP X7	ریموت کنترل: IP 22
شرایط محیطی حمل و انبارش	دمای محیط: ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد، رطوبت: ۱۰ تا ۹۰ درصد، فشار: ۸۶۰ تا ۱۰۶۰ هکتوپاسکال	
شرایط محیطی کار یا دستگاه	دمای محیط: ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد، رطوبت: ۱۰ تا ۹۵ درصد، فشار: ۸۶۰ تا ۱۰۶۰ هکتوپاسکال	
استانداردها	IEC 80601-2-35, IEC 60601-1, IEC 601601-1-11, IEC 60601-1-2	

 های خاکی
 بیات محل و
 ان تعبیه

☐  ☐  ☐  ☒ 

	هشدار
	بازه رطوبت مجاز
	بازه دمایی مجاز
	اطلاعات تولید کننده
	تاریخ تولید

-  دور از دسترس اطفال نگه دارید
-  در حالت مرطوب استفاده نکنید.
-  با دست نشوید
-  از بریدن یا تیغ یا قیچی خودداری کنید.
-  در حالت روشن پد را نزنند